

## *Ambulanze professionali*




*Scegli l'allestimento che meglio si adatta alle tue necessità*



**ALLESTIMENTO**  
*Professional 118*



# ARREDO BASE DI SERIE

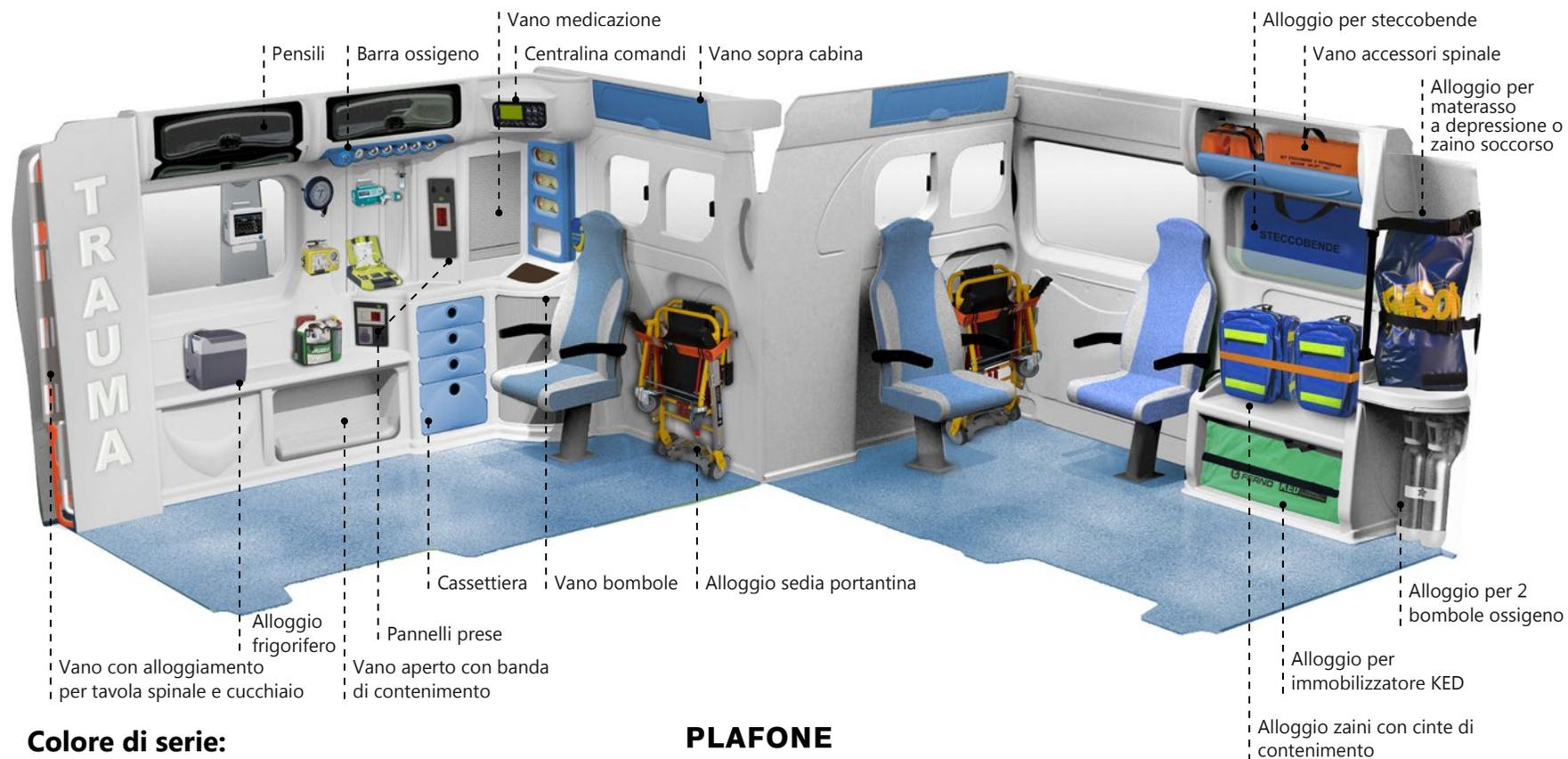


## Colore di serie:



Arredo: grigio alice  
 Inserti: blu colomba  
 Pavimento: blu  
 Sedili: blu diavolo club e grigio

## PLAFONE

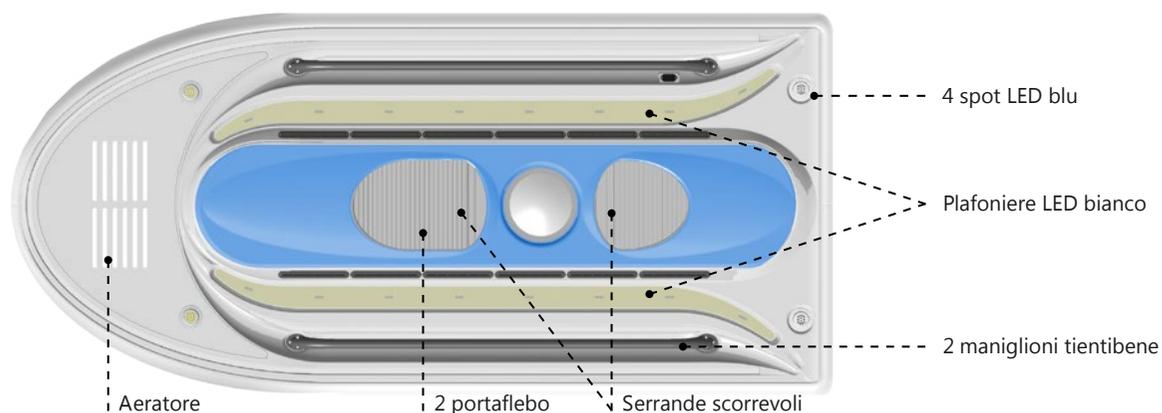

## Allestimento di serie

<b>ARREDI</b>	<b>IMPIANTI</b>	<b>DOTAZIONI</b>
<p><u>PARETE SINISTRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobile basso con vano alloggiamento bombole ossigeno completo di portasondini e portaguanti.</li> <li>- Cassettiera con 3 cassetti e cassetto di grandi dimensioni.</li> <li>- Vano medicazione chiuso da serrandina.</li> <li>- Mobile di raccordo su passaruota con vano illuminato.</li> <li>- Mobile posteriore con alloggiamento verticale illuminato per barella cucchiaio, tavola spinale e tavola pediatrica.</li> <li>- Pensile di raccordo per centralina comandi.</li> <li>- Pensile in RTM con anta apribile in metacrilato, completo di barra ossigeno.</li> <li>- Pensile in RTM con anta apribile in metacrilato.</li> </ul> <p><u>PARETE DESTRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alloggi per ked e zaini grandi.</li> <li>- Sedile frontemarcia girevole con seduta alzabile.</li> <li>- Pensile di contenimento dispositivi medici.</li> <li>- Mobile porta materasso a depressione o zaini.</li> <li>- Vano predisposto per alloggio bombole portatili.</li> </ul> <p><u>DIVISORIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vano sopracabina chiuso da anta basculante.</li> <li>- Sedile contromarcia con seduta alzabile.</li> </ul> <p><u>PLAFONE</u></p> <p>Modello di serie realizzato in RTM completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di illuminazione a led diurna.</li> <li>- Sistema di illuminazione a led notturna.</li> <li>- Sistema dell'aria canalizzato.</li> <li>- Vani portaflebo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spoiler anteriore e posteriore "AIR 118" con 4 lampeggianti LED BLU con funzione di crociera, faretto posteriori: 2 bianchi e 2 arancio.</li> <li>- Sirena bitonale omologata.</li> <li>- Presa esterna 220V.</li> <li>- Pannello prese (4 prese 12V + 3 prese 220V).</li> <li>- Pedana laterale elettrica.</li> <li>- Centralina installata in cabina guida, modello CP10, con interruttori a membrana.</li> <li>- Centralina Control &amp; Safety, alloggiata nel vano sanitario, dotata di tecnologia elettronica, interruttori a membrana retroilluminati con indicazione scritta e icona grafica dell'utenza servita, grande display per la visualizzazione dello stato delle batterie e di tutti i servizi dell'ambulanza.</li> <li>- Ventilatore/aspiratore a soffitto.</li> <li>- Batteria supplementare servizi da 100Ah con caricabatteria.</li> <li>- Climatizzatore vano sanitario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 appendiflebo.</li> <li>- Scambiatore tra bombole e valvola A/C.</li> <li>- 2 prese O<sub>2</sub> UNI.</li> <li>- 2 bombole O<sub>2</sub> da 7 Lt.</li> <li>- 1 flussometro umidificatore.</li> <li>- Sfigmomanometro aneroido.</li> <li>- Rack portastrumenti su finestrino posteriore.</li> <li>- Barella autocaricante completa di bloccaggi 10G.</li> <li>- Getta aghi.</li> <li>- Getta rifiuti.</li> <li>- Piano barella fisso con vano per cucchiaio o tavola spinale.</li> <li>- 1 estintore a polvere da 4 Kg nel vano sanitario.</li> <li>- 1 estintore a polvere da 4 Kg in cabina guida.</li> </ul> <p><u>GRAFICA ESTERNA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascia arancio perimetrale altezza 20 cm, 5 croci di esculapio, scritta speculare <b>AMBULANZA</b> sul cofano anteriore e 2 scritte identificative dell'associazione di appartenenza, Croce Rossa Italiana, Misericordia o ANPAS.</li> </ul>
		

## CONFIGURAZIONE R



### **Variante rispetto al modello di serie**

Parete destra con divanetto monoposto dotato di appoggia schiena imbottito e rivestito con resistente similpelle in tinta con il colore dell'arredo.

## CONFIGURAZIONE S



### **Variante rispetto al modello di serie**

Parete destra con divanetto biposto con appoggia schiena imbottito e rivestito con resistente similpelle in tinta con il colore dell'arredo.

## CONFIGURAZIONE T



### **Variante rispetto al modello di serie**

Parete destra con divanetto biposto con gavone sottostante + struttura appoggia testa e schiena + pensile chiuso con anta in metacrilato trasparente.

ATTENZIONE: si perde il mobile multivano destro.

## CONFIGURAZIONE A



**Variante rispetto al modello di serie**

Parete sinistra con supporto barella cucchiaio  
senza vano TRAUMA.

## CONFIGURAZIONE U



### **Variante rispetto al modello di serie**

Parete destra composta da:

- Sedile comfort supplementare posizionato in tandem.
- Pensile chiuso con anta in metacrilato trasparente.
- Mobile alto a colonna chiuso da serranda scorrevole a scomparsa, suddiviso in due vani interni.

## CONFIGURAZIONE V



### **Variante rispetto al modello di serie**

Parete destra composta da:

- Sedile comfort supplementare posizionato in tandem.
- Pensile chiuso con anta in metacrilato trasparente.

## CONFIGURAZIONE W



### **Variante rispetto al modello di serie**

Parete destra composta da:

- Sedile comfort supplementare posizionato in tandem.

## CONFIGURAZIONE X



### **Variante rispetto al modello di serie**

Configurazione fiancata sinistra con mobile alto posteriore (in sostituzione del vano trauma previsto di serie) composto da:

- Vano superiore chiuso da serrandina scorrevole oppure a giorno.
- Vano bombole inferiore con finestra di ispezione manometri.

## CONFIGURAZIONE Y



### **Variante rispetto al modello di serie**

Configurazione fiancata sinistra con mobile alto posteriore (in sostituzione del vano trauma previsto di serie) composto da:

- 2 vani a giorno con fascia inferiore di contenimento.

## CONFIGURAZIONE Z



### **Variante rispetto al modello di serie**

Configurazione fiancata destra con mobile alto con 2 vani a giorno, pensile con anta superiore apribile, sedile ribaltabile di emergenza e vano per steccobende sul riquadro finestra posteriore.

## CONFIGURAZIONE **UY**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Configurazione **Y fiancata sinistra** con mobile alto posteriore con 2 vani a giorno in combinazione con configurazione **U fiancata destra** con mobile alto posteriore chiuso da serrandina, pensile con anta trasparente e sedili in tandem.


ALLESTIMENTO

# Modular Line



# ARREDO BASE DI SERIE

L'allestimento **Modular Line** consente di poter combinare a piacimento differenti versioni di fiancate sinistra con altrettante versioni di fiancate destra.

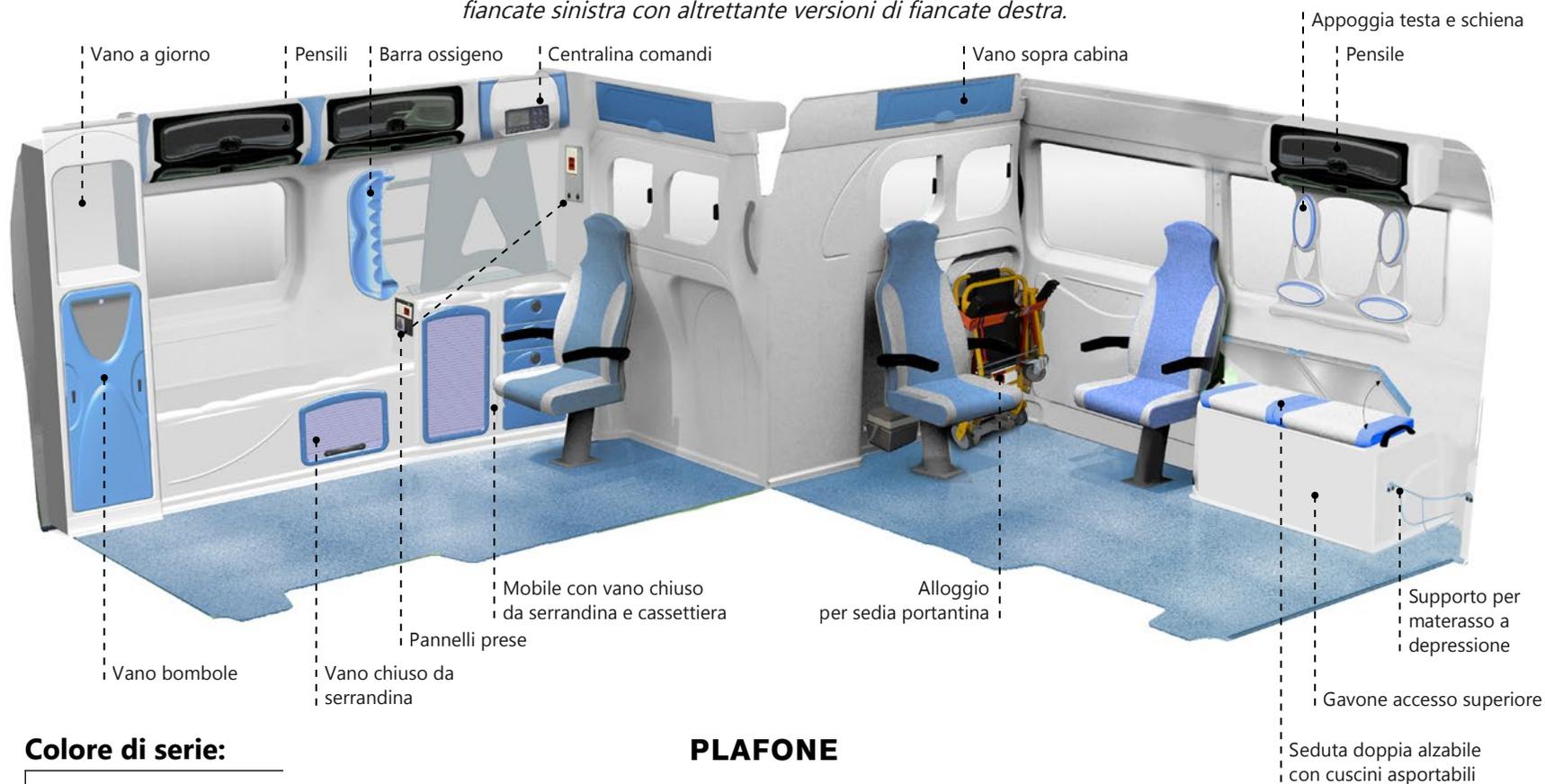


## Colore di serie:



Arredo: grigio alice  
Inserti: blu colomba  
Pavimento: blu  
Sedili: blu diavolo club e grigio

## PLAFONE

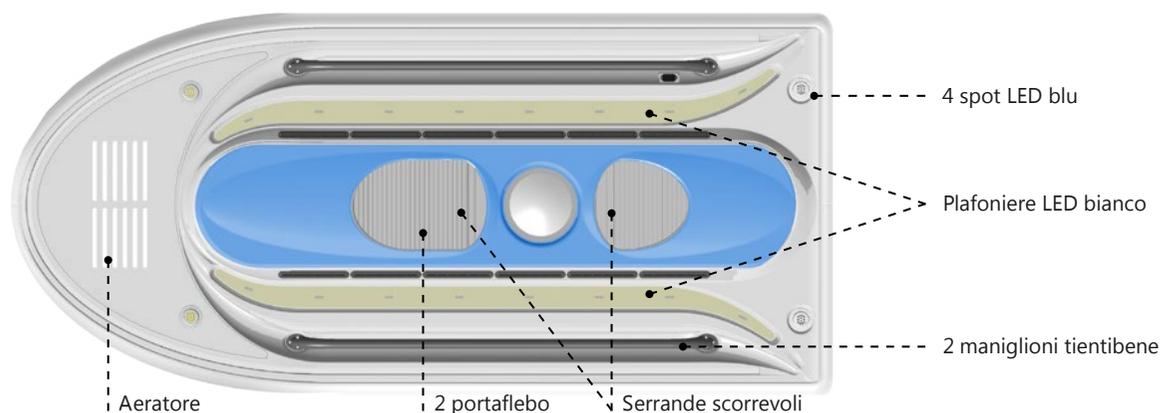

## Allestimento di serie

<b>ARREDI</b>	<b>IMPIANTI</b>	<b>DOTAZIONI</b>
<p><u>PARETE SINISTRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobile basso con vano chiuso da serrandina + 2 ripiani interni.</li> <li>- Mobile cassetiera con 4 cassetti di cui 1 gettarifiuti + porta sondini.</li> <li>- Mobile di raccordo su passaruota chiuso da serrandina.</li> <li>- Mobile posteriore alto con vano superiore a giorno per alloggio zaino, e vano inferiore per alloggio bombole di ossigeno.</li> <li>- Pensile di raccordo con integrato pannello comandi.</li> <li>- 2 Pensili con anta trasparente, illuminato.</li> </ul> <p><u>PARETE DESTRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedile frontemarcia girevole con seduta alzabile.</li> <li>- Pensile con anta trasparente, illuminato.</li> <li>- Divanetto biposto con sedili sdoppiati alzabili per accesso al gavone sottostante.</li> <li>- Poggiatesta e schiena nel riquadro della finestra.</li> </ul> <p><u>DIVISORIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grande vano sopracabina chiuso da anta basculante.</li> <li>- Sedile contromarcia con seduta alzabile.</li> <li>- Doppia finestra apribile.</li> <li>- Vano predisposto per alloggio sedia portantina.</li> </ul> <p><u>PLAFONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di illuminazione a led diurna regolabile d'intensità.</li> <li>- Sistema di illuminazione a led notturna.</li> <li>- Sistema dell'aria canalizzato.</li> <li>- Sistema di aerazione forzata dell'aria con velocità regolabile.</li> <li>- Vano con 2 portaflebo.</li> <li>- 2 Maniglioni tienti bene.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spoiler anteriore e posteriore "AIR 118" con 4 lampeggianti LED BLU con funzione di crociera, faretti posteriori: 2 bianchi e 2 arancio.</li> <li>- Sirena bitonale omologata.</li> <li>- Presa esterna 220V.</li> <li>- Pannelli prese fiancata sinistra (4 prese 12V + 3 prese 220V).</li> <li>- Pedana laterale elettrica.</li> <li>- Centralina installata in cabina guida, modello CP10, con interruttori a membrana.</li> <li>- Centralina Control &amp; Safety, alloggiata nel vano sanitario, dotata di tecnologia elettronica, interruttori a membrana retroilluminati con indicazione scritta e icona grafica dell'utenza servita, grande display per la visualizzazione dello stato delle batterie e di tutti i servizi dell'ambulanza.</li> <li>- Batteria supplementare servizi da 100Ah con caricabatteria.</li> <li>- Climatizzatore caldo/freddo comparto sanitario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 appendiflebo.</li> <li>- Scambiatore tra bombole e valvola A/C.</li> <li>- 2 prese O2 UNI.</li> <li>- 2 riduttori con manometro per bombole ossigeno da lt.7/10</li> <li>- 1 flussometro umidificatore.</li> <li>- Sfigmomanometro aneroido.</li> <li>- Rack portastrumenti su finestrino posteriore.</li> <li>- Barella autocaricante completa di bloccaggi 10G.</li> <li>- Piano barella fisso con vano per cucchiaio o tavola spinale.</li> <li>- 1 estintore a polvere da 4 Kg nel vano sanitario.</li> <li>- 1 estintore a polvere da 4 Kg in cabina guida.</li> </ul> <p><u>GRAFICA ESTERNA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascia arancio perimetrale altezza 20 cm, 5 croci di esculapio, scritta speculare AMBULANZA sul cofano anteriore e 2 scritte identificative dell'associazione di appartenenza.</li> </ul>
		

## FIANCATA SINISTRA **PSX1A**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Dotazione del solo mobile doppio composto da cassetiera con 3 cassette + cassetto grande getta rifiuti e mobile per alloggiamento bombole ossigeno con finestra di ispezione manometri.

## FIANCATA SINISTRA **PSX2A**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Dotazione del mobile doppio composto da cassetiera con 3 cassetti e cassetto grande getta rifiuti + mobile per alloggiamento bombole ossigeno con finestra di ispezione manometri + mobile alto posteriore con due vani a giorno oppure chiuso da serrandina scorrevole.

## FIANCATA SINISTRA **PSX3A**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Dotazione di:

- Mobile doppio composto da cassetiera con 3 cassetti e cassetto grande getta rifiuti + mobile con unico vano chiuso da serrandina scorrevole.
- Mobile alto posteriore con vano a giorno e alloggiamento per bombole, dotato di finestra di ispezione manometri.
- Pensile chiuso da anta in metacrilato trasparente.
- Pensile per alloggiamento centralina di comando servizi.

## FIANCATA SINISTRA **PSX2B**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Dotazione di:

- Mobile doppio composto da cassettera con 3 cassetti e cassetto grande getta rifiuti + mobile con alloggiamento per bombole, dotato di finestra di ispezione manometri.
- Mobile alto posteriore con unico vano chiuso da serrandina scorrevole **oppure aperto a giorno.**

## FIANCATA SINISTRA **PSX4B**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Dotazione di:

- Pensile singolo con anta apribile in metacrilato trasparente.
- Mobile doppio composto da cassetta con 6 cassetti e cassetto grande getta rifiuti + vano aperto con banda di contenimento.
- Mobile posteriore con vano chiuso da serrandina scorrevole e superficie operativa.
- Mobile alto posteriore con alloggiamento per bombole, dotato di finestra di ispezione manometri e vano superiore chiuso da serrandina scorrevole **oppure aperto a giorno.**

## FIANCATA SINISTRA **PSX2C**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Dotazione di:

- Mobile alto anteriore composto da vano medicazione con ripiani, chiuso da serrandina, + cassetiera con 3 cassetti e cassetto grande getta rifiuti.
- Mobile con alloggiamento per bombole, dotato di finestra di ispezione manometri.
- Mobile alto posteriore con unico vano chiuso da serrandina scorrevole **oppure aperto a giorno.**

## FIANCATA SINISTRA **PSX3C**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Dotazione di:

- Mobile alto anteriore composto da vano medicazione con ripiani, chiuso da serrandina oppure aperto a giorno + cassetiera con 3 cassetti e cassetto grande getta rifiuti.
- Mobile basso con 2 vani chiusi da serrandina.

## FIANCATA DESTRA PDX1C



### Variante rispetto al modello di serie

Dotazione di:

- Mobile alto posteriore con unico vano da chiuso da serrandina scorrevole oppure aperto a giorno.
- Sostituzione divanetto doppio con sedile fronte marcia.

## FIANCATA DESTRA PDX2C



**Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione divanetto doppio con sedile fronte marcia.

## FIANCATA DESTRA PDX3C



### Variante rispetto al modello di serie

Dotazione di:

- Mobile alto posteriore con 2 vani a giorno oppure chiusi da serrandina scorrevole e fascia di contenimento inferiore.
- Sostituzione divanetto doppio con sedile fronte marcia.

## FIANCATA DESTRA PDX4C



**Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione divanetto doppio con sedile fronte marcia. Configurazione priva di pensile.

## FIANCATA DESTRA PDX5A



### **Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione fiancata destra con unico rivestimento attrezzato con:

- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta singola e alloggio per zaino.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.

## FIANCATA DESTRA PDX6A



### **Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione fiancata destra con unico rivestimento attrezzato con:


- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta doppia e poggia schiena.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.

**ALLESTIMENTO  
E400**



# ARREDO BASE DI SERIE

L'allestimento **E400** consente di poter combinare a piacimento differenti versioni di fiancate destra.

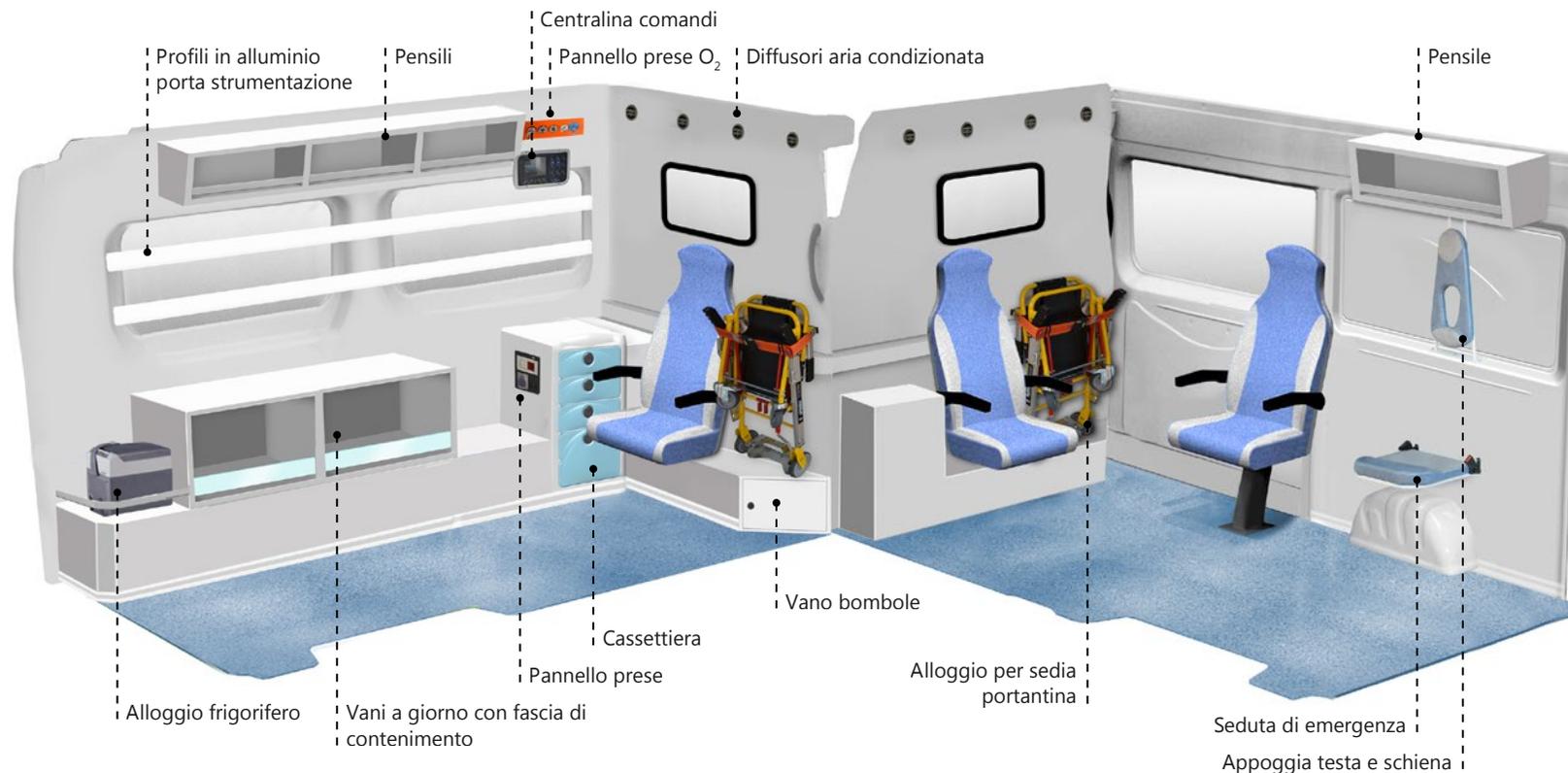


## Colore di serie:



Arredo: grigio alice  
Inserti: blu colomba  
Pavimento: blu  
Sedili: blu jeans e grigio

## PLAFONE

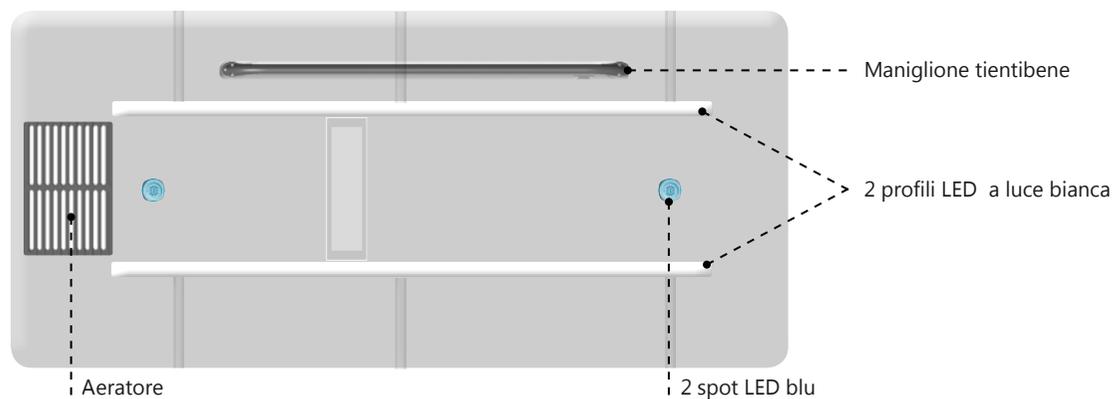

## Allestimento di serie

<b>ARREDI</b>	<b>IMPIANTI</b>	<b>DOTAZIONI</b>
<p><u>PARETE SINISTRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 pensili aperti con banda di contenimento.</li> <li>- Cassettiera con 3 cassetti e cassetto gettarifiuti.</li> <li>- 2 mobili aperti con banda di contenimento.</li> </ul> <p><u>PARETE DESTRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensile aperto con banda di contenimento.</li> <li>- Seduta di emergenza ribaltabile con appoggia testa e schiena</li> <li>- Sedile fronte marcia</li> <li>- Rivestimenti fiancata e porta scorrevole.</li> </ul> <p><u>DIVISORIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vano con alloggiamento bombole ossigeno.</li> <li>- Sedile contromarcia.</li> </ul> <p><u>PLAFONE</u></p> <p>Modello di serie realizzato in RTM completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di illuminazione a led diurna.</li> <li>- Sistema di illuminazione a led notturna.</li> <li>- 1 portaflebo.</li> <li>- 1 maniglione tienti bene.</li> <li>- 1 aeratore tetto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spoiler anteriore e posteriore "AIR 118" con 4 lampeggianti LED BLU con funzione di crociera, faretti posteriori: 2 bianchi e 2 arancio.</li> <li>- Sirena bitonale omologata.</li> <li>- Presa esterna 220V.</li> <li>- Pannello prese fiancata sinistra (4 prese 12V + 3 prese 220V.</li> <li>- Pedana laterale elettrica.</li> <li>- Centralina installata in cabina guida, modello CP10, con interruttori a membrana.</li> <li>- Centralina Control &amp; Safety, alloggiata nel vano sanitario, dotata di tecnologia elettronica, interruttori a membrana retroilluminati con indicazione scritta e icona grafica dell'utenza servita, grande display per la visualizzazione dello stato delle batterie e di tutti i servizi dell'ambulanza.</li> <li>- Ventilatore/aspiratore a soffitto.</li> <li>- Batteria supplementare servizi da 100Ah con caricabatteria.</li> <li>- Climatizzatore vano sanitario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili in alluminio per l'ancoraggio delle attrezzature mediche.</li> <li>- 1 appendiflebo.</li> <li>- Scambiatore tra bombole e valvola A/C.</li> <li>- 2 prese O<sub>2</sub> UNI.</li> <li>- 2 riduttori di pressione con manometro per bombole da lt.7/10.</li> <li>- 1 flussometro umidificatore.</li> <li>- Sfigmomanometro aneroido.</li> <li>- 2 sedili comfort + strapuntino di emergenza.</li> <li>- Barella autocaricante completa di bloccaggi 10G.</li> <li>- Piano barella fisso.</li> <li>- 1 estintore a polvere da 4 Kg nel vano sanitario.</li> <li>- 1 estintore a polvere da 4 Kg in cabina guida.</li> </ul> <p><u>GRAFICA ESTERNA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascia arancio perimetrale altezza 20 cm, 5 croci di esculapio, scritta speculare AMBULANZA sul cofano anteriore e 2 scritte identificative dell'associazione di appartenenza.</li> </ul>



## CONFIGURAZIONE E400P



### **Variante rispetto al modello di serie**

Alloggio per tavola spinale pediatrica su fiancata sinistra.

Sostituzione fiancata destra con unico rivestimento attrezzato con:

- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta singola e alloggio per zaino.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.

## CONFIGURAZIONE **E400P1**



### **Variante rispetto al modello di serie**

Alloggio per tavola spinale pediatrica su fiancata sinistra, mobile con aggiunta alla cassetteria di un mobile con unico vano chiuso da serranda scorrevole, oppure a giorno.

Sostituzione fiancata destra con unico rivestimento attrezzato con:

- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta singola e alloggio per zaino.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.
- Ancoraggio per bombole portatili.

## FIANCATA DESTRA PDX1A



**Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione parete destra con 2 sedili fronte marcia in tandem.

## FIANCATA DESTRA PDX2A



**Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione parete destra con 1 sedile fronte marcia e rivestimento parete.

## FIANCATA DESTRA PDX3A



**Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione parete destra con 2 sedili fronte marcia in tandem e pensile chiuso da anta in metacrilato trasparente.

## FIANCATA DESTRA **PDX4A**



**Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione parete destra con divanetto biposto con gavone sottostante + struttura appoggia testa e schiena + pensile chiuso con anta in metacrilato trasparente.

## FIANCATA DESTRA PDX5A



### **Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione fiancata destra con mobile alto con 2 vani a giorno, pensile con anta superiore apribile, sedile ribaltabile di emergenza e vano per steccobende sul riquadro finestra posteriore.

## FIANCATA DESTRA PDX6A



### **Variante rispetto al modello di serie**

Sostituzione fiancata destra con unico rivestimento attrezzato con:

- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta doppia e poggia schiena.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.

ACCESSORI E OPTIONAL



## COLORAZIONI DISPONIBILI



### **Grigio/Celeste**

Arredo: verde  
Inserti: grigio alice  
Pavimento: verde  
Sedili: blu colomba e grigio



### **Verde/Grigio alice**

Arredo: verde  
Inserti: grigio alice  
Pavimento: verde  
Sedili: verde e grigio




### **Celeste/Grigio alice**

Arredo: celeste  
Inserti: grigio alice  
Pavimento: blu  
Sedili: blu colomba e grigio



### **Celeste/Giallo zinco 1018**

Arredo: celeste  
Inserti: giallo zinco 1018  
Pavimento: celeste e giallo zinco 1018  
Sedili: blu colomba e giallo

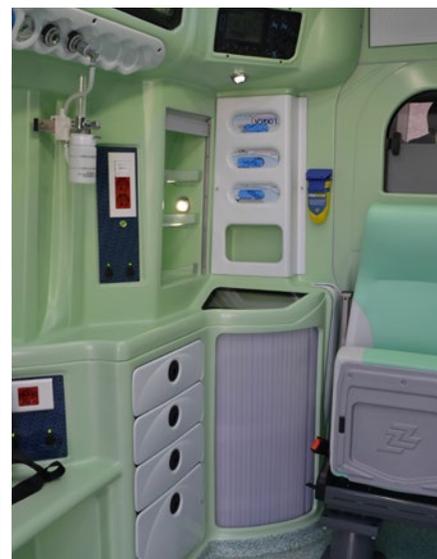

# PORTA DI COMUNICAZIONE

NON DISPONIBILE PER **E 400**




## Comunicazione tra vano sanitario e cabina guida

La porta di comunicazione consente il passaggio degli operatori tra la cabina guida e il comparto sanitario e viceversa. La porta è realizzata con struttura in ferro e doppio rivestimento in RTM, dotata di doppio vetro fisso. È disponibile sia con apertura manuale che elettrica (da specificare nell'ordine).

## VANI CHIUSI

DISPONIBILE SOLO PER **E 400**

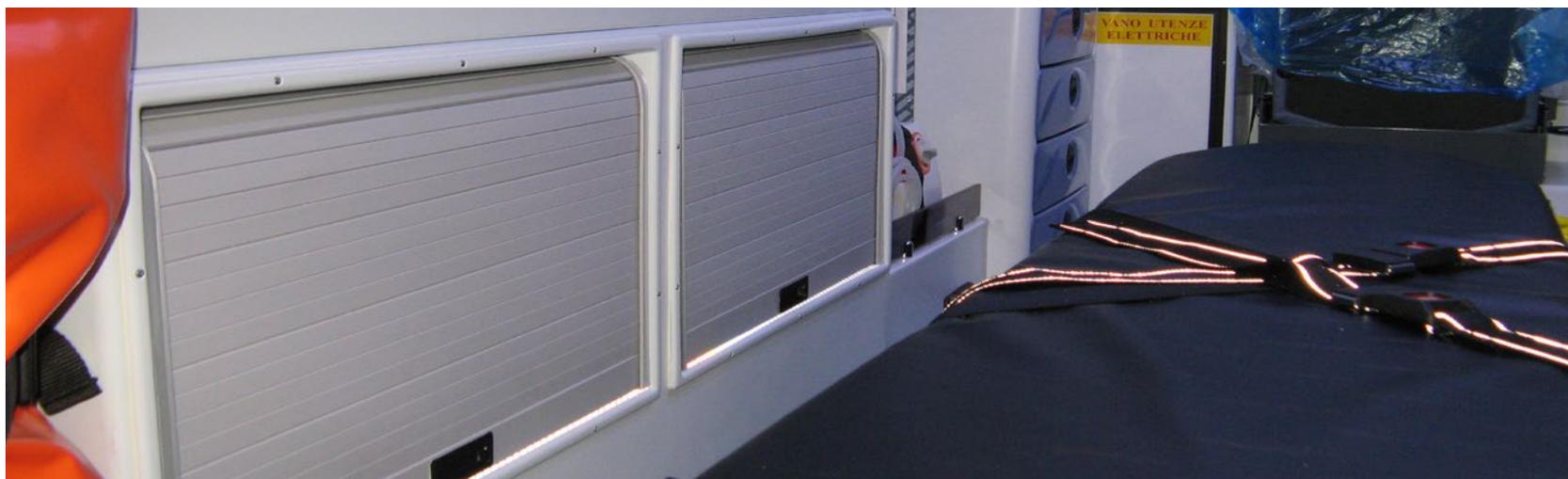


### **Tutto al sicuro**

Nei modelli E400 è possibile chiudere i pensili della fiancata sinistra con ante trasparenti apribili. Inoltre i 2 vani della fiancata sinistra è possibile averli con la serrandina scorrevole a scomparsa.

# PLAFONE NP2014

DI SERIE PER *Professional 118* E *Modular Line*

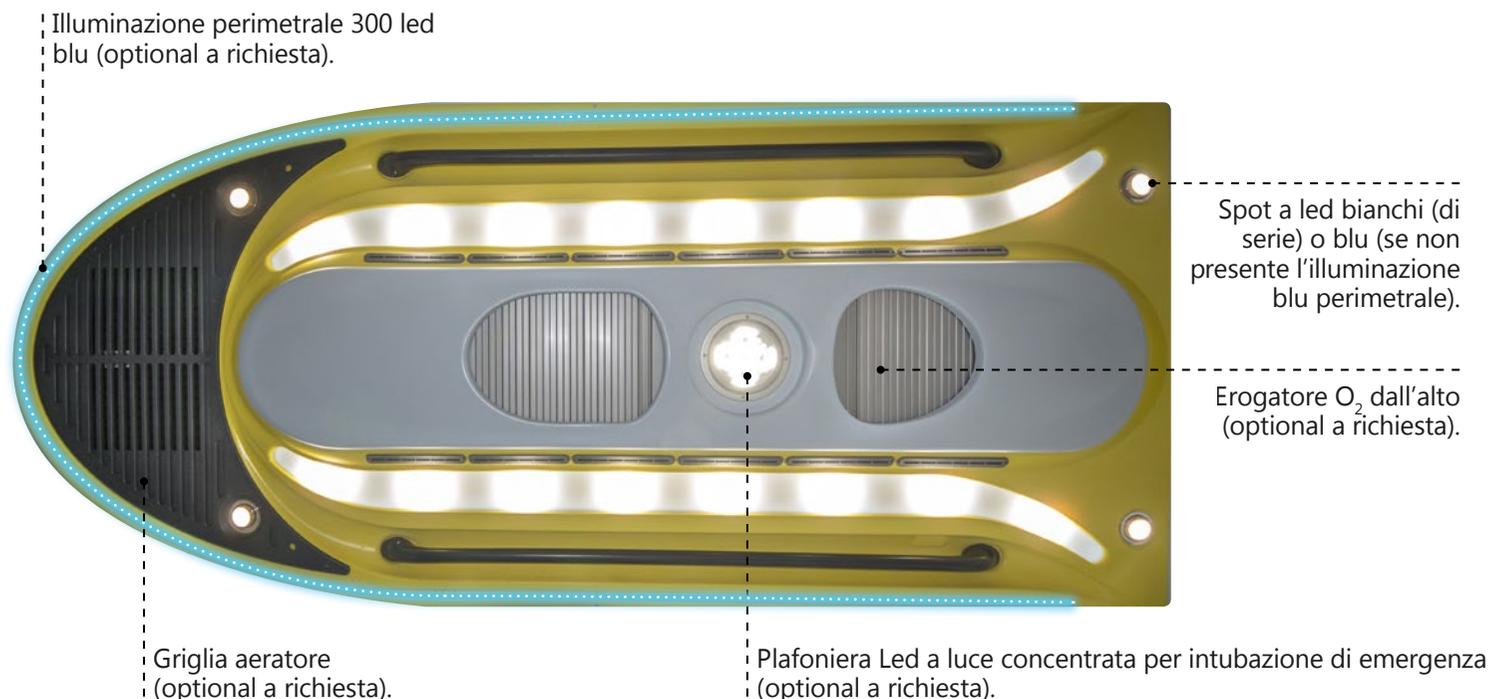

## Plafone multifunzione



Dotato di illuminazione a led assicura un'ottima diffusione della luce su tutta l'area sanitaria, grazie soprattutto alla diversificazione delle sorgenti luminose divise in: plafoniere principali (con luce modulabile), plafoniera concentrata per l'illuminazione della testa del paziente, faretto direzionabile per l'illuminazione soft, e l'illuminazione perimetrale notturna a led blu. La tecnologia Led assicura una lunga durata, consumi ridotti rispetto alle lampade alogene e luminosità graduabile.

Le dotazioni del plafone comprendono l'impianto di canalizzazione dell'aria condizionata che permette un flusso di aria uniforme, la griglia per la ventilazione, 2 maniglioni di appiglio, 2 scomparti che contengono i porta flebo di serie e un erogatore di ossigeno a caduta dall'alto.



# PROFILI LUMINOSI

OPTIONAL A RICHIESTA

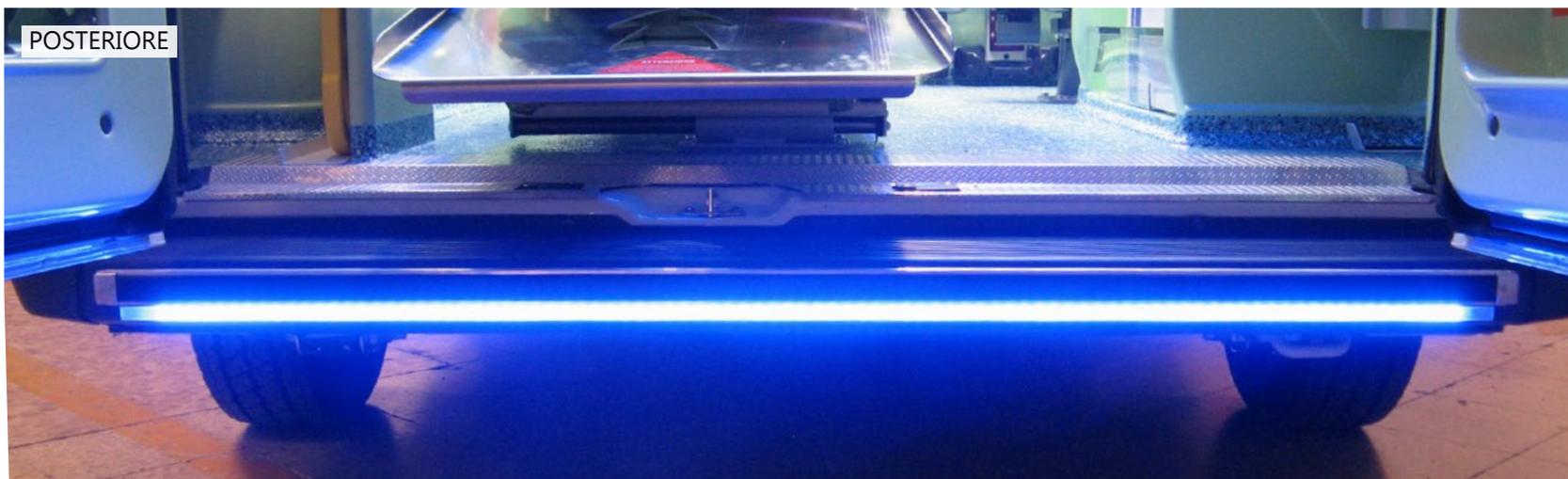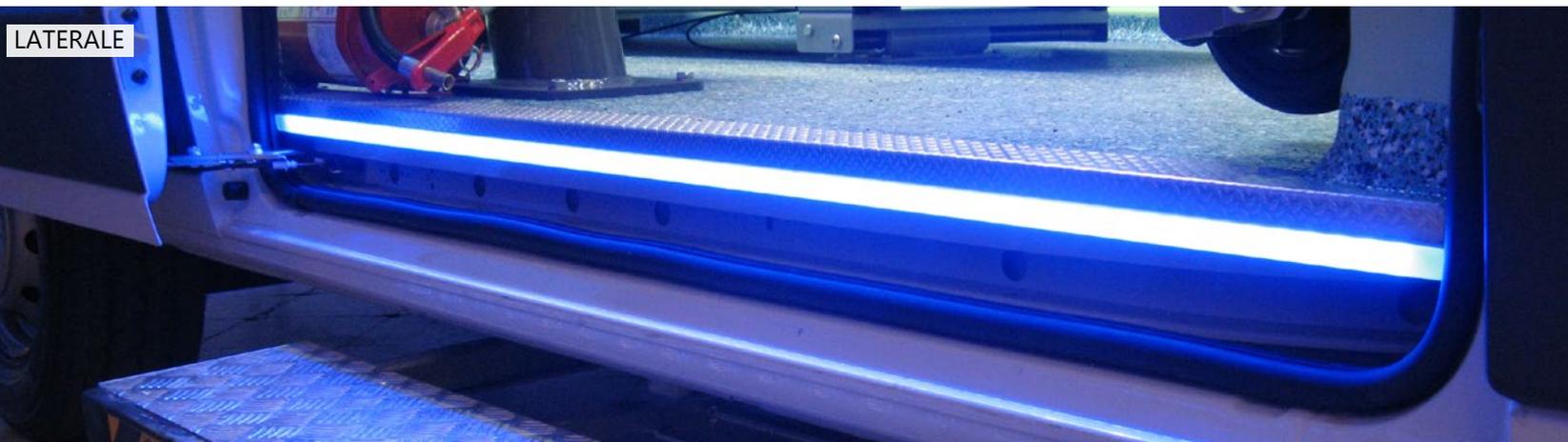

### **Sempre visibili**

I profili di alluminio dotati di fasce Led di segnalazione blu sono applicati sul bordo del paraurti posteriore e sul bordo di accesso laterale (sotto porta scorrevole). Si accendono automaticamente all'apertura delle porte. Segnalano e aumentano la visibilità nell'accesso in ambulanza.

## MODULO THERMOBOX



### **THERMOBOX per la conservazione dei farmaci in emergenza**

THERMOBOX "Hot Box e Cold Box" per il contenimento e la conservazione dei farmaci e flebo a bordo dell'ambulanza. E' un dispositivo realizzato dalla nostra azienda, costituito da 2 vani separati, chiusi da anta trasparente apribile verso l'alto, un vano dedicato a frigorifero fisso (temperatura impostabile da 4° a 20°), un riscaldatore fisso (temperatura impostabile da 5° a 40°). I pannelli per impostazione della temperatura sono azionabili separatamente e posizionati nel mobile operativo angolare vicino alla postazione medica.

# IMPIANTO DISIGEN

OPTIONAL A RICHIESTA



## Disinfezione automatica

Il DISIGEN è un dispositivo elettromeccanico, esente da manutenzione, che in pochi minuti decontamina e disinfetta l'ambiente sanitario in ambulanza, attraverso quattro ugelli integrati nell'allestimento, che nebulizzano un efficace disinfettante. Il DISIGEN è attivabile tramite un pulsante posto nella cabina guida dell'ambulanza, sia con ambulanza ferma che in movimento, ed ha un funzionamento ciclico e temporizzato. Una volta attivato si disattiva automaticamente dopo aver completato l'intero ciclo di nebulizzazione. Il DISIGEN nebulizza un disinfettante che ha un tempo di azione di 10 minuti, successivamente alla nebulizzazione non è necessario aerare l'ambiente decontaminato, si può utilizzare subito l'ambulanza, non c'è traccia di cattivi odori. Il disinfettante non è tossico, non irrita la pelle, gli occhi e le vie respiratorie, e non dà reazioni allergiche.

# IMPIANTO SANICLIMA

OPTIONAL A RICHIESTA



**SANICLIMA impianto di disinfezione del comparto sanitario integrato nell'evaporatore.  
(Alternativa al DISIGEN)**

SANICLIMA NEWS Ambiente sanitario sempre salubre. L'IMPIANTO è dotato di un sistema di FILTRAZIONE DELL'ARIA "ANTIBATTERICO" integrato nel climatizzatore con principio di funzionamento "Fotocatalisi", per la filtrazione e il trattamento antibatterico continuo di tutta l'aria all'interno del comparto sanitario, durante la marcia del veicolo e con impianto di climatizzazione in funzione. La filtrazione dell'aria è attiva costantemente con impianto clima attivo. Sono garantite 40.000 ore di funzionamento. Entro i primi 30 minuti di funzionamento, l'abbattimento è del 99% di funghi e streptococchi.

## PIANI BARELLE



### **SUPPORTO LETTIGA TRASLABILE TOP 1 CON 1 VANO**

Supporto traslabile a un vano (in sostituzione del supporto fisso previsto di serie) per barella primaria dotato di un vano per cucchiaio o spinale. Realizzato in lega di alluminio con piano in acciaio. Il supporto è completo di spondina posteriore con pistoncini a gas che accompagnano e sostengono il movimento.

### **SUPPORTO LETTIGA TRASLABILE TOP 2 CON 2 VANI**

Supporto traslabile TOP2 a due vani (in sostituzione del supporto fisso previsto di serie) per barella primaria dotato di vani per cucchiaio e spinale. Realizzato in lega di alluminio con piano in acciaio. Il supporto è completo di spondina posteriore con pistoncini a gas e sistema di inclinazione automatica del piano durante le operazioni di carico-scarico lettiga.

# SPOILER AIR 118

DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

Faro di ricerca (optional a richiesta).




## Semplicemente aerodinamici

Gli spoiler AIR 118 hanno una forma aerodinamica e sono dotati di calotte specifiche a goccia, realizzate in polimero stampato a iniezione.

Lo spoiler anteriore è predisposto per i lampeggianti e il faro di ricerca, mentre lo spoiler posteriore è dotato oltre che dei lampeggianti anche di fari circolari per l'indicazione di direzione, di stop, e per la luce di retromarcia.

## SPOILER AIR 112

OPTIONAL A RICHIESTA PER  
*Flat Ducato, Peugeot Boxer e Citroen Jumper*

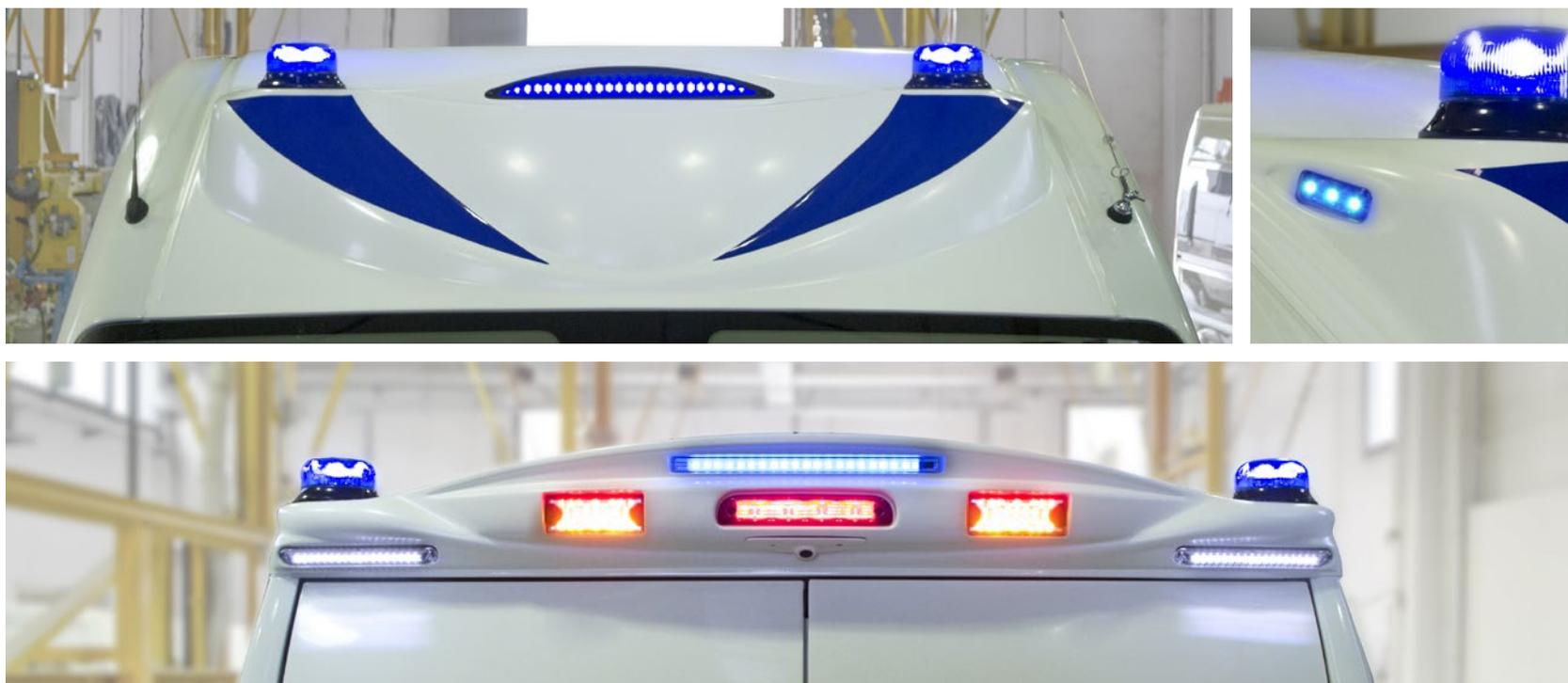

### SISTEMA LUMINOSO AIR 112

Coppia di spoiler anteriore e posteriore, realizzati in materiale composito, design aerodinamico, perfettamente plasmati sulla carrozzeria del veicolo, dotati di 4 lampeggianti a luce Blu Led, a spessore ribassato.

Lo spoiler anteriore è dotato del seguente gruppo luminoso:

- 2 lampeggianti a Led, spessore ribassato, posizionati agli angoli dello spoiler (sostituibili con lampeggianti piu' grandi, fino a 200 mm. di diametro).
- 1 minispoiler Lumix con fascia Led Blu di segnalazione posizionato al centro dello spoiler, tra i due lampeggianti (sostituibile con applicazione di Faro di ricerca).
- 2 micro Led Blu da 3 Led cadauno, uno su ogni lato dello spoiler, fissato in una sede predisposta.
- 2 fasce di pellicola fluorescente adesive colore a scelta, che partono dalla base dei lampeggianti e convergono al centro dello spoiler.

Lo spoiler posteriore è dotato del seguente gruppo luminoso:

- 2 lampeggianti a Led, spessore ribassato, posizionati agli angoli dello spoiler (sostituibili con lampeggianti piu' grandi, fino a 200 mm. di diametro).
- 2 luci a Led Bianco per illuminazione zona operativa posteriore, posizionati ai lati dello spoiler.
- 1 luce a Led Blu, per segnalazione di emergenza, posizionata in alto, al centro dello spoiler.
- 2 fari rettangolari a Led multiluce rosso e arancio, posizionati equidistanti al centro dello spoiler.
- 1 luce stop rosso centrale, posizionato al centro dei fari multiluce.
- 1 alloggiamento per la telecamera originale del veicolo, posizionato al centro dello spoiler nella parte inferiore.

# SPOILER SUPERVISOR

OPTIONAL A RICHIESTA

fig. 1



fig. 2



## Il design funzionale

Spoiler aerodinamici con calotte personalizzate. Lo spoiler posteriore è dotato di fari per l'indicazione di direzione e lo stop più 2 strobo per la segnalazione e 2 fari a led per l'illuminazione posteriore. La telecamera per la retromarcia è incassata al centro.

OPTIONAL A RICHIESTA: fardo di ricerca (fig. 1) o Lumix frontale (fig. 2) per la segnalazione supplementare

## MINISPOILER LUMIX

OPTIONAL A RICHIESTA



### LUMIX PROIETTORE LATERALE A LUCE BIANCA

Dispositivo per l'illuminazione dell'area operativa laterale, circostante e radente l'AMBULANZA. Il LUMIX è stato sviluppato per l'applicazione fissa, a modulo singolo, ed è posizionabile sul bordo laterale del tetto dell'ambulanza, con inclinazione verso l'esterno. Sulla stessa fiancata possono essere applicati fino a 4 minispoiler LUMIX, a Led Bianco oppure a Led Blu, oppure alternati uno a Led Bianco e uno a Led Blu. Il Lumix a Led bianco garantisce l'illuminazione laterale, circostante e radente l'ambulanza.

## SPOILER SNAKE

OPTIONAL A RICHIESTA



### **LUMIX PROIETTORE LATERALE A LUCE BIANCA**

SNAKE è uno spoiler applicabile sul cofano anteriore di veicoli Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Dodge Promaster.

Lo spoiler è completo di sorgenti luminose composte da: n.2 fari a Led Bianchi per illuminazione dell'angolo cieco destro e sinistro anteriore, che integrano anche una serie di Led Blu di segnalazione. Nella parte anteriore dello spoiler, trova alloggiamento una serie di Led Blu di segnalazione, che sostituiscono i classici spot a Led Blu incassati nella mascherina del veicolo. Disponibile in vari colori.

## FARETTI LATERALI

OPTIONAL A RICHIESTA



### **LUCE DOVE SERVE**

I faretti laterali consentono di illuminare l'area laterale, radente e circostante del veicolo. Sono posizionati nel fianco del veicolo e dotati di luce alogena.

# CENTRALINA CP10

DI SERIE



## SEMPLICE ED EFFICACE

La centralina comandi CP10 di serie dispone di 10 tasti a membrava con icone intuitive retro-illuminate e 4 spie avvisi. Il pannello elettronico è posizionato centralmente nel cruscotto.

# CENTRALINE TOTAL CONTROL

OPTIONAL A RICHIESTA




## Sicurezza alla guida

Le centraline TOTAL CONTROL sono disposte in maniera concentrica rispetto al volante, questo permette all'autista di poter attivare/disattivare le utenze senza togliere le mani dal volante, aumentando quindi la sicurezza alla guida in situazioni di emergenza.

Il pannello comandi sul lato SX è provvisto di un display (128x64 mm) dove vengono visualizzate le varie utenze attive, segnalazione pedana estratta, porte aperte e lo stato di carica delle batterie, più 2 tasti dedicati al menù. La pulsantiera in rilievo identifica ogni comando, ciascuno provvisto di spia che ne segnala la funzione acceso/spento.

# CENTRALINA TOUCHSCREEN

OPTIONAL A RICHIESTA

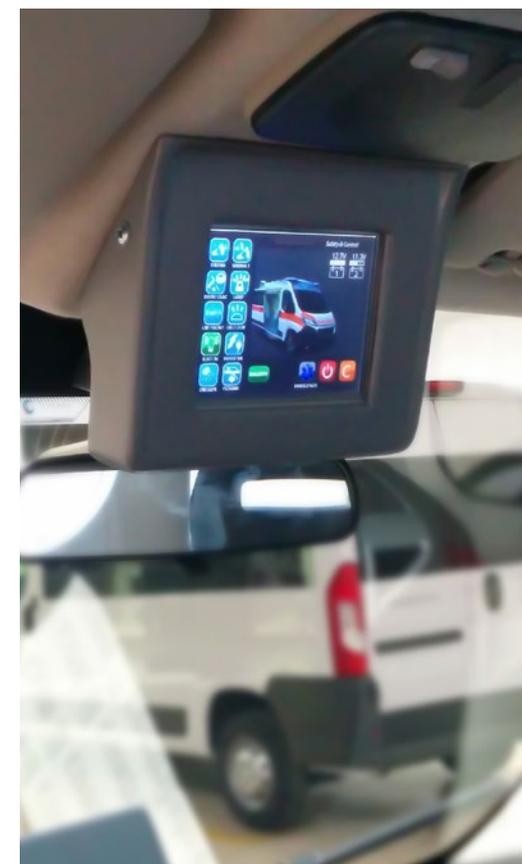

## Massimo controllo

La centralina TOUCHSCREEN è alloggiata in cabina guida sul rivestimento tetto a ridosso dello specchietto retrovisore, leggermente inclinata verso il conducente. La centralina comanda i dispositivi supplementari d'emergenza acustici e sonori, eventuali luci esterne, il gradino elettrico e gli impianti del vano sanitario. Dispone di 13 tasti con icone e scritte dedicati all'attivazione/disattivazione delle utenze e dei servizi. Al centro della grafica è presente un'illustrazione dell'ambulanza che mostra le utenze attive: lampeggianti accesi, strobo nella mascherina accesi, e gli avvisi: presa esterna inserita, porte aperte e gradino laterale estratto. Nella parte superiore ci sono le indicazioni dello stato di carica delle batterie e dei pannelli solari (se installati). In basso si visualizza la temperatura del vano sanitario.

ALLESTIMENTO

# *Professional 118*



ALLESTIMENTO

# *Professional 118*



ALLESTIMENTO

*Modular Line*



ALLESTIMENTO

**E 400**









+39 0773 258.256 - [www.bollanti.it](http://www.bollanti.it)